

Si duket Evalyn®Brush?

Evalyn®Brush është një furçë vetë-mostrimi, afërsisht 18 cm e gjatë, e përbërë nga një cilindër i tejudkshëm me krahë dhe një kapak. Brenda cilindrit të pastër është një piston rozë që përfundon në një furçë të bardhë mostrimi. Fundi i furçës mund të hapet dhe mbyllet me një kapak rozë.



Furçë për marrjen e mostrave



Kapak rozë



Krahë

Cilindër të tejudkshëm



Pistoni

SILLNI MOSTRËN NË NJË NGA LOKACIONET E MËPOSHTME:

LOKACIONI 1



LAGJA TAFTALIXHE

Bul. "8 Shtatori" nr. 2, lok. 1, 1000 Shkup
email: lab@avicenalab.com.mk

LOKACIONI 2



LAGJA AERODROM

Bul. "Jane Sandanski" nr. 13-1/A 1000 Shkup
email: lab2@avicenalab.com.mk

LOKACIONI 3



LAGJA KISELA VODA

Rr. "Mariovska" nr.2-A, 1000 Shkup
email: lab4@avicenalab.com.mk

LOKACIONI 4



TETOVË

Rr. "Blagoja Toska" nr. 222, 1200 Tetovë
email: labtetovo@avicenalab.com.mk

 Qendra e kontaktit: 02 3179 001



www.avicenalab.com.mk



Prodhues:

Rovers Medical Devices B.V.

Lekstraat 10, 5347 KV Oss

The Netherlands

T +31 (0)412 648 870

info@roversmedicaldevices.com

www.roversmedicaldevices.com

Rovers® dhe Evalyn®Brush janë marka të mbrojtura të regjistruara të Rovers Medical Devices B.V. me seli në Oss, Holandë.



Udhëzime për përdorim

Furçë për vetë-mostrim të testit HPV



evalyn®brush

CE
0044

REF 380500131

Version EC-2021-03-EN



Udhëzime për vetë-mostrim

Evalyn[®]Brush është një pajisje mjekësore sterile që ju lejon të merrni një mostër në shtëpi. Duke përdorur furçën Evalyn[®]Brush, mund të merrni thjesht dhe pa dhimbje materialin e qelizave vagjinale që analizohet më tej në një laborator diagnostik..


VINI RE:

- Mos e përdorni Evalyn[®]Brush nëse paketimi është i dëmtuar ose nëse ka kaluar afati i përdorimit.
- Mos e përdorni furçën Evalyn[®]Brush gjatë ciklit menstrual.
- Mos e përdorni Evalyn[®]Brush gjatë shtatzënisë ose në tre muajt e parë pas përfundimit të shtatzënisë.
- Mos përdorni produkte vagjinale për të paktën dy ditë para se të përdorni Evalyn[®]Brush.
- Kontraceptivët vaginalë, prezervativët dhe lubrifikantët me bazë uji zakonisht mund të përdoren.
- Evalyn[®]Brush është vetëm për përdorim të njëhershëm.
- Ripërdorimi mund të rezultojë në infeksion dhe/ose diagnozë të gabuar.



1

Lani duart tërësisht përpara përdorimit.

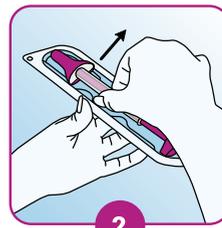

2

Hiqeni furçën Evalyn[®]Brush nga paketimi. Mos e hidhni paketimin, pasi është e nevojshme për të dërguar mostrën në laborator.



3

Shtypni anët e kapakut rozë me gishtin e madh dhe tregues për të hequr kapakun. Kini kujdes që të mos prekni me duar pjesën e sipërme të bardhë të furçës (mbi krahët)!




4

Merrni një qëndrim të rehatshëm dhe një pozicion në këmbë njësoj sikur futni një tampon vaginal.



5

Hapni buzët e turpshme me njëren dorë dhe me tjetrën futeni furçën në vagjinë derisa krahët të prekin buzët.

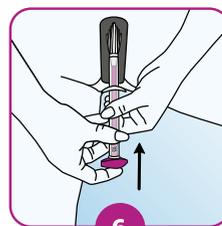

6

Mbajeni cilindrin e tejdukshëm me njëren dorë dhe shtypni pistonin rozë me dorën tjetër. Do të dëgjoni një "klik" kur furça të jetë në pozicionin e duhur.




7

Rrotulloni pistonin rozë pesë herë në të njëjtin drejtim. Do të dëgjoni një tingull "klik" pas çdo rrotullimi. Kjo do t'ju ndihmojë të numëroni rrotullimet. Pasi të keni bërë të 5 rrotullimet, hiqni me kujdes furçën Evalyn[®]Brush nga vagjina.



8

Mbajeni cilindrin e tejdukshëm me njëren dorë dhe tërhiqni pistonin rozë me dorën tjetër derisa furça e bardhë të jetë plotësisht brenda cilindrit të tejdukshëm. Përderisa e bëni këtë, mos prekni majën e furçës mbi krahët.

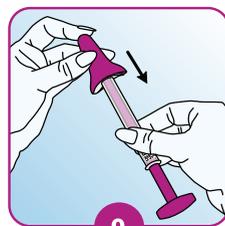

9

Mbajeni cilindrin e tejdukshëm në mënyrë që furça të mos dalë përsëri. Vendosni kapakun rozë me gishtin e madh dhe tregues. Do të dëgjoni një "klik" kur kapaku të jetë në pozicionin e duhur.



10


Furçën e mbyllur Evalyn[®]Brush në këtë mënyrë, kthejeni në paketimin e vet.



11

Vendoseni paketimin së bashku me Evalyn[®]Brush në qesen që keni brenda kompletit.

*Të ruhet në temperaturën e dhomës.

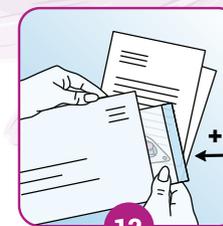

12

Shkruani të dhënat tuaja personale në deklaratë/formular dhe ta çojeni mostrën në laborator.

*Koha nga marrja e mostrës deri në dërgimin e saj në laborator nuk duhet të jetë më e gjatë se 24 orë.